SIBELMED · ESPIROMETRÍA

Filtro bacteriano/vírico para espirómetro · 28 mm

Filtro desechable con boquilla integrada para pruebas de función pulmonar en adultos y niños. Retiene más del 99,99 % de bacterias y virus con baja resistencia al flujo, protege al paciente y al equipo, y evita usar una boquilla adicional. Viene en caja de 100 unidades, envasadas una por una.



99,99 % bacterias y virus

Filtrado electrostático y mecánico con membrana de polipropileno 3M.

Baja resistencia

Menos de 1,5 $cmH_2O/l/s$ a 14 l/s: no altera la medición.

Boquilla integrada

Diseño ovalado y ergonómico para adultos y niños; no necesita boquilla extra.

Caja x 100

Desechable de un solo uso, envasado individualmente.

Espirometría · Neumología · Medicina ocupacional · Pediatría · Hecho en España


Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC

ESPECIFICACIONES

Sibelmed 09698 · Filtro 28 mm

Producto	Filtro bacteriano/vírico desechable para espirometría, con boquilla integrada
Código de fábrica	09698
Conexión	28 mm
Eficiencia bacteriana	99,99999 % a 30 l/min · 99,9943 % a 750 l/min
Eficiencia vírica	99,9981 % a 30 l/min · 99,7680 % a 750 l/min
Resistencia	Menos de 1,45 hPa/l/s (1,5 cmH_2O/l/s) a 14 l/s
Espacio muerto	Menos de 50 ml
Filtrado	Electrostático y mecánico
Membrana	Polipropileno (3M™)
Peso	40 g
Clasificación	Clase IIa según Directiva 93/42/CEE
Presentación	Caja x 100 unidades, envasadas individualmente
Fabricante	Electromedicina Sibel S.A. (Sibelmed) · España

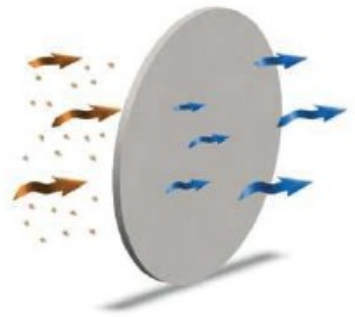

Filtrado electrostático y mecánico

Cómo se usa

1. Abrir el envase individual justo antes de la prueba.
2. Conectar el filtro al espirómetro (28 mm).
3. El paciente sopla directo por la boquilla ovalada.
4. Desechar el filtro al terminar: es de un solo paciente.

Compatibilidad

- Espirómetros Sibelmed
- Otros equipos de función pulmonar con entrada de 28 mm (consultar)

Ventajas

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Protege el sensor y prolonga la vida del espirómetro
- Boquilla integrada: menos insumos por prueba
- Sellado y estable frente a factores externos

Cuidado y uso

- Producto de un solo uso: no reutilizar ni reprocesar
- Usar un filtro nuevo por cada paciente
- Guardar en lugar seco, lejos del calor y del polvo
- No usar si el envase está abierto o dañado

Marca · Modelo
Sibelmed 09698

Código MD Perú
SIB-RES-001

Imágenes referenciales. Precio y venta por caja de 100 unidades. Especificaciones según la ficha técnica de Sibelmed (Electromedicina Sibel S.A., España); pueden cambiar sin previo aviso.

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617 · www.mdperu.com

Distribuido por
BG Soluciones Médicas SAC